

標準タイプ

加湿器装置付タイプ

KM12 KM12

3A 5A

暮らしに寄り添う 酸素濃縮装置。



かんたん

運転、停止、ロック、流量設定など
全てをパネル操作。

あんしん

火災検知機能：もしもの時、
すばやく酸素の供給を停止。

音声ガイダンス

音声でわかりやすくお知らせ。




標準タイプ(加湿器なし)
KM12-3A

加湿器装置付タイプ
KM12-5A

■ 簡単「操作パネル」(※下図表示パネルは KM12-5A)

わかりやすい操作とアラーム内容がすぐわかる表示をパネルに採用しました。

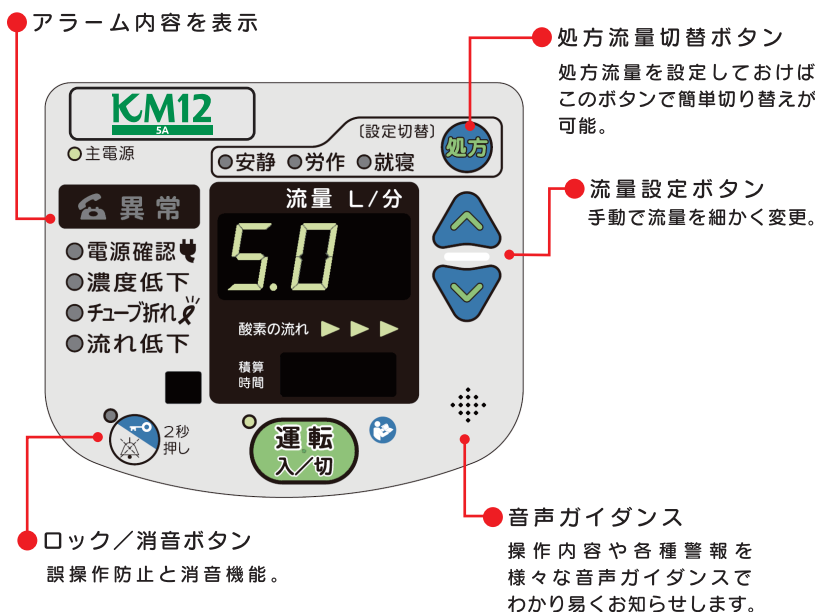

■ 安心機能～火災検知機能～

ホース類が延焼等した場合、機器に火が入る前に素早く酸素の供給を停止します。

■ 加湿器の有無の選択

- ・乾燥が気になる際は、加湿器を取り付けることもできます。
- ・流量設定は0.25 L/分の低流量まで対応します。また、低流量時は加湿器無しでの使用も可能になりました。



加湿器装置付タイプ
KM12-5A

■ 仕様

販売名／製品名	ライトテック-3A / KM12-3A	ライトテック-5A / KM12-5A
一般の名称／クラス分類	酸素濃縮装置／管理医療機器・特定保守管理医療機器	
医療機器認証番号	229AHBZX00010000	228AHBZX00023000
流量設定 (L/min)	0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0	0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0
酸素濃度	全設定流量 90% (-3% / +6%)	
消費電力	1ℓ/分 80W, 2ℓ/分 100W, 3ℓ/分 120W	1ℓ/分 80W, 3ℓ/分 120W, 5ℓ/分 195W
運転音	1ℓ/分 26dB(A), 3ℓ/分 30dB(A)	1ℓ/分 26dB(A), 3ℓ/分 30dB(A), 5ℓ/分 32dB(A)
重量	約 20Kg	
寸法 (単位: cm)	W27×H53×D44	
電源	AC100V 50/60Hz	
電源入力	270VA	410VA
電撃保護	クラスⅡ機器、B型装着部	
EMC	JIS T 0601-1-2:2012 に適合／CISPR11、グループ1、クラスB	
警報機能	電源確認、濃度低下、流れ低下、チューブ折れ、異常(圧力、流量、制御コンプレッサー、高温、火災検知)、始動期間アラーム	
使用条件	室内、周囲温度 5～35℃、相対湿度 30～75% (結露なきこと) 使用気圧範囲 900～1060hPa (標高 1000m まで)	

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
- 画像は一部合成です。

発売元 株式会社 小池 メディカル
本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
TEL: 03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp

製造販売元 ダイキン工業株式会社

■ お問い合わせは…

2020.12